

ECG 電極

再使用禁止

(運動負荷用ディスプレイ電極)

【禁忌・禁止】


- (1) 本製品を使用するにあたり改造は絶対に行わないこと。[重大な事故(感電、誤った生体信号の出力等)の原因となることがあるため]
- (2) 本製品はディスプレイ品のため、再使用は行わないこと。

併用医療機器

磁気共鳴画像診断装置(MRI)環境下では使用しないこと。
[誘導起電力による局所的な発熱で被験者が火傷を負うことがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状

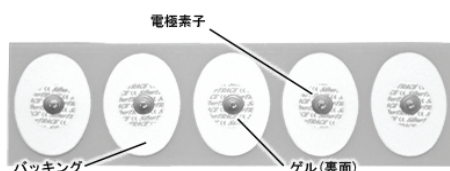

構造・構成ユニット

カタログ番号	品名
900703-205	運動負荷用ディスプレイ電極
900703-230	
電極の大きさ	39x52mm
電極の素材	Ag/AgCl
ゲルタイプ	ウェットゲル
バッキング材	フォーム

【使用目的、効能又は効果】

体表に設置し、体表の電気信号を処理装置(心臓の電気活動をグラフで表示する)に伝達する導体をいう。
この電気活動を記録する一般的な装置は心電計(ECG)である。本製品は単回使用である。

【品目仕様等】

カタログ番号	DC オフセット電圧	AC インピーダンス
900703-205	20mV 以下	250Ω 以下(10Hz)
900703-230		


【操作方法又は使用方法等】

本製品は、心電図用ディスプレイの電極で、主に運動負荷検査時に使用する。
本製品を使用するにあたり、本製品を接続して使用する運動負荷装置等に付属されている取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

使用方法

1. 皮膚の前処理としては、本製品の貼付部を事前に清潔にし乾燥させ、油分を取り除くこと。
分けることが難しい濃い、あるいはカールした体毛部は除毛すること。
2. 電極を剥離シートからゆっくりと剥がし、患者の電極装着位置に電極をしっかりと密着させること。
3. 電極リード線のクリップ等を電極の電極素子部分にしっかりと装着させること。
4. 本製品を剥がす際は、電極リード線を外してから本製品の端よりゆっくりと剥がすこと。

《電極装着位置》

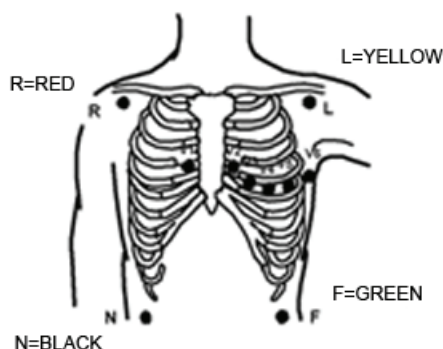

12誘導の場合

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用すること。
2. 本製品は、皮膚障害のある部位には貼らないこと。
[皮膚が損傷する恐れがあるため]
3. 当社指定以外の装置に使用しないこと。
[当社指定以外の装置起因する故障については、責任を負いかねるため]
4. 皮膚に発赤や腫れ等の症状が現れたときは使用を中止すること。
[肌が弱い患者に対して症状が現れることがあるため]
5. 他の型式の電極と混在して使用しないこと。
[安定した波形を得られないことがあるため]
6. 24 時間を超えての使用は行わないこと。
[同じ電極で 24 時間以上の使用は行わず、新しい電極、異なる部位で使用する]

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

1. 保管条件
周囲温度： 5～30℃
相対湿度： 10～95%(結露なきこと)
2. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること
(3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

使用期限

外箱に記載。

但し、保管の状況により差異が生じることがある。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- **1. 本製品を使用する前に、損傷、劣化、異常等が無いか目視点検を行うこと。
- 2. 使用期限を過ぎた電極は使用しないこと。
- 3. 本製品開封後は、ゲルが乾燥しやすいので早めに使用すること。
- 4. 本製品開封後に残った電極は、乾燥しないよう、パッケージの端を折って保管すること。

【包装】

カタログ番号	数量
900703-205	5 個/袋、 30 袋/箱 (150 個/箱)
900703-230	30 個/袋、 10 袋/箱 (300 個/箱)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

*製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

**お問い合わせ先： 消耗品受注センター
電話： 0120-187-855
FAX： 042-582-6923

製造業者： ルドロー テクニカル プロダクツ カナダ
リミテッド
(Ludlow Technical Products Canada Ltd.)

国名： カナダ

社内部品番号： 5404222